

D DOCTORAIR

| 取扱説明書 |



エクサガン プラス

EXAGUN PLUS / REG-10

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために	3
各部の名称と機能	9
充電する	13
エクサガン プラスを使用する	15
お手入れと保管について	17
故障かなと思ったら	18
主な仕様	20
保証とアフターサービス	22

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について

誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけないこと。



必ず守る

必ず行うこと。

警告

- 自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方には使用させない。(ケガや思わぬ事故の原因)
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。(症状を悪化させる原因)

例：心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)・頸椎症・飲酒や薬を服用中の方・化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など

- 次の部位には使用しない。

・整形手術をした部位・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位／例：アトピー性皮膚炎、皮膚の炎症、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・背骨部位・関節部位

- 身体に過度な負担をかける使用はしない。(事故や体調不良の原因)

- 首の周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しない。(事故やケガの原因)

- 次のような場所での使用および、保管はしない。(事故やケガ、故障の原因)

- ・乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所
- ・こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、高温になる場所
- ・直射日光が当たる場所や車内など、高温になる場所
- ・水のかかる場所、高温高湿の場所、ほこりの多い場所
- ・振動や衝撃の加わりやすい場所
- ・強電磁界下

- アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しない。(事故やケガの原因)

- 乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(思わぬ事故の原因)

- 本体の充電用ジャック(Type-C)の隙間に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まない。(火災や感電、故障の原因)



禁止

警告

- 湿布剤(スプレー式などを含む)との併用はしない。(体調不良の原因)
- 本製品は防水仕様ではないため、風呂場などで使用しない。(漏電によって、感電や発火の原因)
- 付属のアタッチメント以外は使用しない。また、付属品はすべて本製品専用のため、他の機器には使用しない。

充電機について

- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
 - ・ 加熱や火中投下
 - ・ 高温環境でのご使用、充電、放置
 - ・ こたつや布団に入れてのご使用、充電
 - ・ 毛布などを被せてのご使用、充電
 - ・ 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電
- 性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
性能の落ちたリチウムイオン電池を無理に使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
* 使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
 - ・ 電池の膨張・異音・異臭
 - ・ 充電しても動作しない
 - ・ 極端に使用時間が短くなった
 - ・ 充電中に熱くなる



禁止

警告

- 次の方は必ず医師と相談の上、使用する。(事故・体調不良・症状悪化の原因)
 - ・ ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方
 - ・ 金属アレルギーの方
 - ・ 悪性腫瘍のある方
 - ・ 心臓に障害のある方
 - ・ 重度の血行障害がある方
 - ・ 妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方
 - ・ 糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方
 - ・ 高血圧の方、紫斑になりやすい方
 - ・ 安静を必要とする方や体力の衰えた方
 - ・ 体温38℃以上(有熱期)の方
例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき
 - ・ 骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方
 - ・ 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科的疾患の方
 - ・ 背骨に異常のある方・医師の治療を受けている方
 - ・ 上記以外に特に身体の異常を感じている方
- 初めてお使いになる方や、長時間ご使用にならなかった方、ご高齢の方などは最初から長時間ご使用にならず、使い慣れるまで短時間で弱い振動で使用する。
- ご使用の際は、必ず付属のアタッチメントを取り付けてから使用する。
- 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合がある。結露したまま使用すると、故障の原因になるので、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れる。



警告

- ご使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は、医師に相談する。(事故や体調不良の原因)
- 異常・故障時に直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)
<異常・故障例>
本体、アダプタ、コードが
 - ・変形したり、異常に熱い
 - ・異常音や異臭・煙発生すぐにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。



必ず守る

電源について

- 濡れた手でACアダプタをコンセントから抜き差ししない。(感電の原因)
- 電源プラグ・USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因)
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重い物をのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
- ACアダプタが傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。



分解禁止

- 分解・改造は絶対にしない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は危険を伴うため、絶対にしない。

注意



禁止

- 用途以外の目的で使用しない。(ケガや体調不良の原因)
- 他の器具、機器などと同時に使用しない。(事故やケガ、体調不良の原因)
- 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。(火災や感電、故障の原因)
- 用途以外に負荷がかかるような使用はしない。
- ご使用中に眠らない。(事故やケガの原因)
- 飲酒中や飲酒後は使用しない。(事故やケガの原因)
- 使用中はほかの作業を行わない。(事故やケガの原因)
- 医療行為には使用しない。



必ず守る


- 連続使用はしない。(逆効果・ケガの原因)
- 本製品は振動するため、落とさないようにしっかりと握って使用する。
- アタッチメントが動作することにより、肌との間に摩擦が生じる場合があるため、摩擦が強い場合は、タオルなどをあてた上で使用する。
- 食後は十分に時間を置いてから使用する。(体調不良の原因)

電源について

- コンセントや配線器具の定格を守る。(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因)
- 本体や電源プラグなどにほこりが付着しないように定期的にお手入れを行う。(湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災の原因)
- 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜く。
- 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止する。(故障の原因)
- 直接肌に使用する際は、基礎化粧品やオイル、クリームなどは併用せず、必ず素肌に使用する。(アタッチメント破損の原因)
- ご使用中は本体とアタッチメントの間に指がはさまれたり、髪が巻き込まれないように注意する。

各部の名称と機能

本体

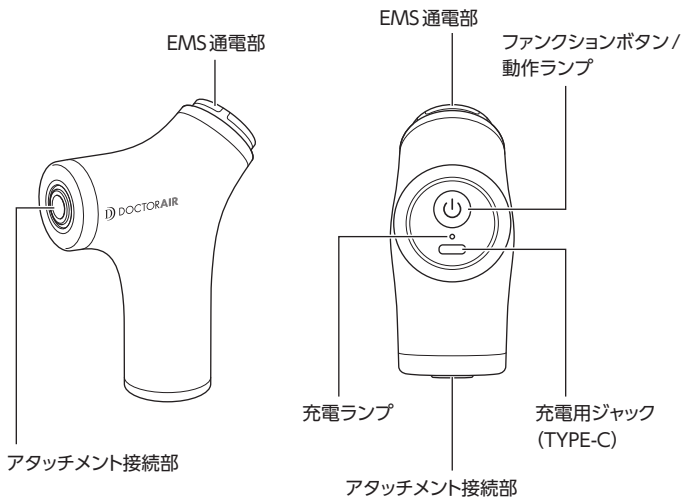

アタッチメント接続部

付属のアタッチメントを取り付けて使用します。

EMS通電部

- モード4 (EMS 1)、モード5 (EMS 2)、モード6 (EMS 3)でEMSが動作します。
- 顔のリフトケアに使用します。

ファンクションボタン

- 長押し(約1.5秒)で電源のオン/オフを切り替えます。
- 短押しでモードが以下のように切り替わります。
モード1→2→3→4→5→6→1…の繰り返し。

動作ランプ

点灯色で選択中のモードを示します。

モード		動作ランプ
振動	モード1 (振動1)	青点灯
	モード2 (振動2)	緑点灯
	モード3 (振動3)	赤点灯
EMS	モード4 (EMS 1)	青点滅
	モード5 (EMS 2)	緑点滅
	モード6 (EMS 3)	赤点滅

充電ランプ(赤、緑)

充電状態と電池残量を示します。

<充電中>

赤点灯

※満充電になると消灯します。

<動作中>

緑点灯 : 電池残量 多

緑点滅 : 電池残量 中


高速緑点滅 : 電池残量 少

充電用ジャック


充電時にUSBコード(TYPE-C (A-C))を接続します。

付属品


アタッチメント

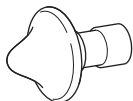

ポイント形アタッチメント
足裏などに使用します。

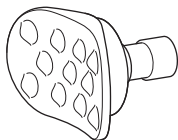


ワイド形アタッチメント
腕、ふくらはぎなどに使用します。

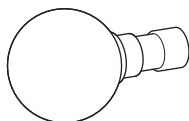

球形アタッチメント
肩まわりから背中、腰、太ももやおしりなど大きな筋肉のケアに使用します。

その他の付属品

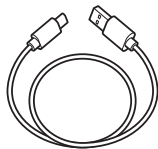

USBコード
(TYPE-C(A-C))




取扱説明書
(保証書付)

充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

ご注意

- 充電中は動作(振動／EMS動作)しません。動作中に充電を行うと、自動的に電源が切れ、充電が開始されます。
- ご使用前に、本体やアタッチメントに損傷がないかをご確認ください。異常が発見されたときは、そのまま充電は行わず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 充電を行っても十分に充電できない、または充電持続時間が短い場合は、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電する場合、電池持続時間が短い場合があります。

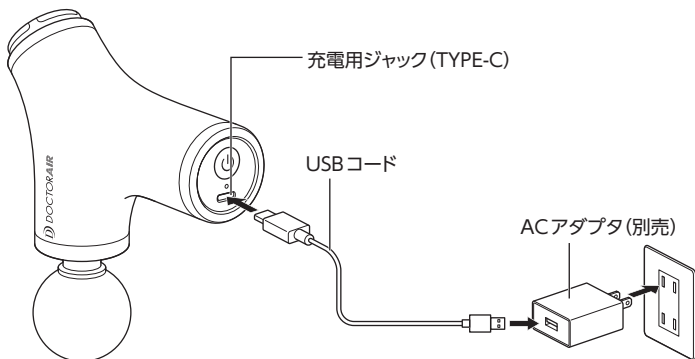

1 USBコード(TYPE-C(A-C))を本体の充電用ジャック(TYPE-C)に接続します。

奥までしっかりと挿し込んでください。

2 USBコード(TYPE-C(A-C))をお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

ご注意

- 市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
- ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。

不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。

3 充電が完了したらUSBコード(TYPE-C(A-C))を本体と充電器の両方から外してください。

エクサガン プラスを使用する

本製品には、6つのモード(振動 3モード/EMS 3モード)、3種類のアタッチメントが用意されています。ご自身に合ったモードやアタッチメントを選択してください。

ご使用になる前に

- ご使用前に、またはしばらくご使用にならなかった場合、ファンクションボタンなどが正常に動作することを確認してください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。詳しくは「充電する」(13ページ)をご覧ください。
- 本製品は振動します。ご使用の際には本体を落とさないように十分ご注意ください。
- 必ず付属のアタッチメントを取り付けてご使用ください。
- 本体アタッチメント接続部には触れないでください。
- ご使用中は本体とアタッチメントの間に指がはさまれたり、髪が巻き込まれたりしないよう、ご注意ください。
- ご使用中の摩擦によりアタッチメントの色が色移りする可能性がありますので、薄色の衣服を着用の際は十分にご注意ください。
- 本製品は1回7分のタイマーで電源が切れるように設定されていますが、連続使用する際は同一か所に長時間使用しないでください。逆効果やケガの原因になります。
- 連続使用などにより本体やアタッチメントの接続部が熱くなることがあります。その際はしばらく冷ましてからご使用ください。
- 各アタッチメントご使用時の注意事項を十分確認のうえ、ご使用ください。
- 初めて使用される際は、安全のため必ずモード1からお試してください。

- 1** アタッチメント接続部にお好みのアタッチメントを取り付けます。
アタッチメントをアタッチメント接続部にまっすぐ根本までしっかりと押し込んでください。
- 2** ファンクションボタンを約 1.5 秒、長押しします。
電源が入り、モード 1（振動 1）が開始されます。
- 3** ファンクションボタンを押して振動レベルを調整します。
押すたびにモード 1 → モード 2 → モード 3 → モード 4 → モード 5
→ モード 6 → モード 1…
の順序で切り替わります。
モードにあわせて、動作ランプの点灯様式が切り替わります。
- 4** 本製品を身体の気になる部分に当てます。
太ももやふくらはぎ、肩や腕など、気になる部分に本製品を軽く押し当てたり、ゆっくりなぞるように動かして使用してください。
- 5** 電源がオンになってから約 7 分経過すると、自動的に振動が停止し、電源がオフになります。
※モードを途中で切り替えてもタイマーはリセットされません。
- 6** 途中で振動を停止させるには、ファンクションボタンを約 1.5 秒長押しします。
※振動と EMS は併用できません。ファンクションボタンでモードを切り替えることで、各機能が切り替わります。

お手入れと保管について

お手入れについて

ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

ご使用后、本体及びアタッチメントなどに汗が残らないよう、やわらかい布でしっかりとふき取ってください。

汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。その後、乾いた布で乾ききってください。

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、お持ちの袋などに入れて保管してください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細な内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても振動しない	<ul style="list-style-type: none">• 充電中はファンクションボタンを押しても動作しません。充電完了後にお使いください。• 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
振動が弱い	<ul style="list-style-type: none">• 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
EMSの刺激を感じない、刺激が弱い	<ul style="list-style-type: none">• 肌に密着させてください。• 強さを調節してください。• 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。• 肌が乾燥している可能性があります。水またはぬるま湯で湿らせてください。
肌が赤くなる 肌がチクチクする	<ul style="list-style-type: none">• EMSモードの使用時間が長すぎる可能性があります。• EMS通電部は金属製ですので、金属アレルギーの方は、一旦ご使用を中止し、医師と相談してください。

症状	確認していただくこと
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> • 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度 10℃～ 40℃の環境下で充電を行ってください。 • 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻ります。 • ACアダプタで充電する場合は、定格出力 DC5.0V 2.0A以上を必ず使用してください。 • 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上に対応したUSBコードをご使用ください。
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品は、電源がオンになってから約7分経過すると、自動的に全ての動作が停止し電源がオフになります。 • 充電電池が消耗している可能性があります。再度充電を行ってください。 • アタッチメントを体に強く押し当てると、安全のため停止します。体に当てる際は強く押し当てないようにしてください。
使用時に製品から音がする	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

本体

製品名	エクサガン プラス
型番	REG-10
電源	充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1100mAh)
電気定格	26W以下(動作時) 3.8W(充電時)
充電時間*1	約3時間
充電可能回数*1	約300回
騒音	60dB以下
振動回数*1	モード1: 約2,500回/分 モード2: 約3,000回/分 モード3: 約3,500回/分
EMS周波数	約15Hz
タイマー	約7分
使用環境温湿度	+10℃～+40℃、85% R.H.以下
保存環境温湿度	-10℃～+60℃、85% R.H.以下
寸法	約W100mm×H130mm×D38.5mm(本体のみ)
質量	約230g

材質	本体材質：ABS、シリコン アタッチメント材質：ABS、シリコン
付属品	ポイント形アタッチメント、ワイド形アタッチメント、球形アタッチメント、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)
生産国	中国
対応ACアダプタ*2	定格出力：DC5.0V 2.0A以上を使用すること

*1 実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。
当社推奨の使用方法に基づきます。

*2 ACアダプタは付属していません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。

また内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(18ページ)をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源コードを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名：REG-10
- 故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関する
お問い合わせ



保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

定期点検のお願い

エクサガン プラスの定期点検をお願いします

こんな症状はありませんか？

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 内部に異物や水が入った
- 本体に変形や破損がある
- その他異常がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

無料保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けにできない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - 不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - 弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

保証書

製品名	エクサガン プラス
型番	REG-10
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げ日より本体 1年間 （消耗品および付属品は除く）

| お客様情報 |

フリガナ お名前	
ご住所	〒
お電話番号	
メールアドレス	
販売店名	
住所 電話番号	〒

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買上げ日とさせていただきます。販売店名欄に記入のない場合は、お買上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただきました保証書の控えは、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用しません。

（無料保証規定のページもご覧ください。）

故障・修理のお問い合わせ

| ドクターエアお客様相談窓口 |



0120-05-8000

10時～18時

年中無休（年末年始除く）



取り扱い店舗情報などは

ドクターエア

検索

百貨店舗をはじめ、全国の有名百貨店や家電量販店などで
ご体感いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。

